



Dentalprodukte

MADE IN GERMANY

**NEO-TEC Dental**  
Carl-v.-Ossietzky-Str. 25  
99423 Weimar  
Germany

Tel.: +49 3643/4434363  
Fax: +49 3222/4392960  
Mail: [info@neotecdental.de](mailto:info@neotecdental.de)  
[www.neotecdental.de](http://www.neotecdental.de)

# SZ Nano Composite LC

SZ Nano Composite LC on valguskõvastuv ning röntgenkontrastne täidismaterjal mis sobib nii esi- kui tagahammastele. Meie komposiidil on kasutatud nano-sfäärilist tehnoloogiat millel on kootumisvastane toime, materjalil on ideaalne toonide adaptatsioon (kameeleoni efekt), antibakteriaalsed omadused tänu tsingi ja fluori ionide eraldumisele. Saadaval neljas värvitoonis: A1, A2, A3 ja A3.5.

SZ Nano Composite LC - это светоотверждаемый и рентгеноконтрастный пломбировочный материал для реставрации как передних, так и задних зубов. В нашем композитном материале используется нано-сферическая технология, имеется функция анти-усадки, идеальная адаптация тонов (эффект хамелеона), также имеются antibakterialnye свойства, благодаря выделению ионов цинка и фтора. Доступен в четырех цветовых тонах: A1, A2, A3 и A3.5.

SZ NANO COMPOSITE LC, üstal/шприц (3g)	
REF SZ11-01	värv/цвет A1
REF SZ11-02	värv/цвет A2
REF SZ11-03	värv/цвет A3
REF SZ11-04	värv/цветA3.5

## EELISED | ПРЕИМУЩЕСТВА

- 01.** Kootumisvastane toime tänu sfääriliste nanofillerite kasutamisele ja kõrgele täituvusastmele (83%)  
Функция анти-усадки, благодаря использованию сферических наполнителей с высокой степенью наполнения (83%)
- 02.** Antibakteriaalne toime: bakteritsiidsed tsingi ioonid pärsivad bakterite kasvu | Antibakterialnye свойства: бактерицидные ионы цинка препятствуют росту бактерий.
- 03.** Ideaalne värvi adaptatsioon tänu kameeleoni efektile, vähendab kasutatavate värvide arvu. Vaja läheb ainult 4 värvi. | Идеальная адаптация цвета реставрации, благодаря эффекту хамелеона уменьшает гамму используемых цветов. Необходимо всего 4 цветовых тона.
- 04.** TEGDMA ja HEMA vaba | Не содержит TEGDMA и HEMA



# SZ Bulk Fill LC

KIIRE JA OHUTU TÖÖ POLE KUNAGI OLNUD NII LIHTNE!  
БЫСТРАЯ И БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА НИКОГДА НЕ БЫЛА ТАКОЙ ПРОСТОЙ!

SZ Bulk Fill LC Cromatico on voolav valguskõvastuv komposiit mis on mõeldud tagumiste hammaste direktsete täidiste valmistamiseks ja ühe astme (korraga täitmise) tehnika kasutamiseks (kihi paksus kuni 4 mm).

SZ Bulk Fill LC Cromatico - это текучий светоотверждаемый материал для реставрации задних зубов и использования техники одномоментного заполнения кавитета (bulk fill) (толщина слоя до 4 мм).

1

### Kiire ravi teie patsientidele | Быстрое лечение для ваших пациентов:

- Kihipaksus kuni 4 mm / korraga täitmise (bulk fill) tehnika | Слой материала до 4 мм / техника одномоментного заполнения
- Kaks värvitooni kõikide hambavärvide jaoks. | Два цвета материала для всех оттенков зубов.
- El ole vajadust viimase oklusaalse kihi tegemiseks Klass II täidistes. | Нет необходимости в финальном окклюзионном слое в реставрациях II Класса.

2

### Biosobivad täidised | Биосовместимые реставрации:

- BPA, TEGDMA and HEMA vabad - kõrge biosobivus | Не содержат BPA, TEGDMA и HEMA - высокая биосовместимость
- Väga madal kootumine: 2,8% | Очень низкая усадка: 2,8%
- Kõrge survetugevus: 381 MPa | Высокая прочность на сжатие: 381 МПа

3

### Lihtne ja universaalne materjali kasutamine | Простое и универсальное применение:



Kaks värvitooni kõikide hambavärvide jaoks | Два цвета материала для всех оттенков зубов:

- Cromatico light: madala värviintensiivsusega hammastele | для зубов с небольшой насыщенностью цвета
- Cromatico Plus: kõrgema värviintensiivsusega hammastele | для зубов с высокой насыщенностью цвета

**Sobib ka kaviteedi põhja alustäidiseks! | Также подходит для подкладки на дно кавитета!**



## SZ BULK FILL LC

REF SZ13-11	Cromatico Light - süstal/шприц (2g) 10 otsikut/насадок	
REF SZ13-12	Cromatico Plus - süstal/шприц (2g) 10 otsikut/насадок	

# SZ Ultimate Seal LC

## ISESÖÖBIV JA VALGUSKÕVASTUV FISSUURIDE SILANT INTEGREERITUD SE-BONDIGA

## САМОПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ И СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ ФИССУРНЫЙ ГЕРМЕТИК С ИНТЕГРИРОВАННЫМ SE-БОНДОМ

SZ Ultimate Seal LC otsene pealekandmine. Ei vaja söövitamist ega bondi. Otsene pealekandmine vähendab vigade tekke tõenäosust ravi ajal ning lühendab raviaega. Eriti hea rahutute patsientide- ning laste puhul, kes ei suuda pikalt suud lahti hoida ja kellele ei meeldi happeline maitse suus.

SZ Ultimate Seal LC может быть нанесен напрямую на зубы. Не требует протравки кислотой и нанесения бонда. Прямое нанесение уменьшает время лечения и вероятность ошибок. Особенно хорош для использования у беспокойных пациентов и детей, которые не могут долго держать рот открытым и не любят вкус кислоты во рту.



### EELISED | ПРЕИМУЩЕСТВА

- Otsene pealekandmine, ei vaja söövitamist ega bondi. | Прямое нанесение - не требует протравки и нанесения бонда.
- Ideaalne laste- ja rahutute patsientide puhul lühikese raviaja tõttu. | Идеален для детей и беспокойных пациентов, благодаря короткому времени нанесения.
- Pärsib kaarieseteket tänu fluori eraldumisele | Антикариогенный, благодаря выделению фтора.
- Vedel, voolab hästi fissuuridesse. | Высокотекучий - хорошо затекает в фиссуры
- Suurepärase adhesiooni hambaemali pinnale | Отличная адгезия к поверхности эмали.



### SZ ULTIMATE SEAL LC

	2 süstalt/шприцов (à 2g)
REF SZ19-01	20 otsikut/насадок
	20 harja/щеток
	1 harjahoidja/держатель для щеток

# SZ Flow Auto-Adhesive LC

1

## Isesööbiv ja isekleepuv Самопротравливающийся и самоприклеивающийся (автоадгезивный)

Söövitamine ja bond ei ole vajalikud  
Протравка и бонд не требуются

2

## Lihte ja tõhus ravi Простое и эффективное лечение

Lühendatud raviäeg.  
Укороченное время лечения.

3

## Fluori eraldav Выделяет фтор

Kaariest peatav toime tänu fluori  
eraldumisele.

Антикариогенные свойства,  
благодаря выделению фтора



VALGUSKÕVASTUV VOOLAV, ISESÖÖBIV JA ISEKLEEPUV KOMPOSIIT  
СВЕТОТВЕРЖДАЕМЫЙ, ТЕКУЧИЙ, САМОПРотРАВЛИВАЮЩИЙ И  
АВТОАДГЕЗИВНЫЙ КОМПОЗИТ:

- ✓ Sisaldab SE Bondi: SZ Flow Auto-Adhesive LC võib aplitseerida ühe etapi meetodil. Lisasöövitamine ja -bondi pealekandmine ei ole vajalik, kuna bond on komposiidi sisse integreeritud.  
Содержит SE Бонд: SZ Flow Auto-Adhesive LC может быть нанесен одноэтапным методом. Дополнительное протравливание и нанесение адгезива не требуются, так как адгезив уже интегрирован в композит.
- ✓ Fluori eraldamine: kaariest peatav toime tänu fluori eraldumisele.  
Выделение фтора: имеет антикариогенные свойства, благодаря выделению фтора

SZ FLOW AUTO-ADHESIVE, 2 süstalt/шприцов (à 2g), 20 otsikut/насадок, 20 harja/щеток, 1 harjahoidja/держатель для щеток	
REF SZ15-02	värv/цвет A2
REF SZ15-03	värv/цвет A3
REF SZ15-04	värv/цвет A3.5

# SZ Viskos Flow LC

**Komposiit täidismaterjalide uus põlvkond: kõva täidismaterjali- ja voolava komposiidi eelised ühes tootes!**

**Новое поколение композитных пломбировочных материалов: свойства твердых композитов и текучего композита в одном материале!**

Idealne direktse restauratsioonina ja alusmaterjalina samuti ka fissuuride silandina. Materjal kombineerib endas voolava komposiidi kergest käsitletavust ja kõva täidismaterjali tugevust.

Материал идеален как для директных реставраций и подкладок, так и как фиссурный герметик. Комбинирует в себе лёгкость использования текучих композитов и физические свойства твердых композитных материалов.



## SZ VISKOS FLOW LC

REF SZ15-12	A2 süstal/шприц (2g), 10 otsikut/насадок
REF SZ15-13	A3 süstal/шприц (2g), 10 otsikut/насадок
REF SZ15-14	A3.5 süstal/шприц (2g), 10 otsikut/насадок

### Kiire ja lihtne kasutus | Быстрое и легкое применение:

- Kameeleoni efektiga värvide reguleerimine | Регулировка цвета с эффектом хамелеона.
- Kiire ja lihtne poleerimine läikiva pinna saamiseks | Быстрая и простая полировка для получения блестящей поверхности.
- Ühildub turul saadavate standardsete bonding süsteemidega | Совместимость со стандартными бондинг системами, доступными на рынке.
- Ideaalne voolavus ja viskoossus (ei tilgu) | Идеальная растекаемость и вязкость (без подтекания).

### Biosobivad täidised | Биосовместимые реставрации:

- BPA, TEGDMA ja HEMA vaba – kõrge biosobivus | Не содержит BPA, TEGDMA и HEMA - обладает высокой биосовместимостью.
- Suurepärase kaviteedi seinte kujuga ühilduvus | Превосходное прилегание стенкам кавитета.
- Suurepärase füüsilised omadused: | Превосходные физические характеристики:
  - 77% filleriga täituvus | содержит 77% наполнителя
  - 794 MPa Vickersi kõvadus | Твердость по Виккерсу 794 МПа
  - 431 MPa survetugevus | Прочность на сжатие 431 МПа
- Ühendab endas voolava komposiidi käsitlemise lihtsust ja pasta-tüüpi komposiidi kõrgeid füüsilisi omadusi | Сочетает в себе простоту обращения текучего композита с высокими физическими характеристиками пастообразного композита.
- Kõrge röntgenkontrastsus (210% Al) ohutuks kasutamiseks. | Высокая рентгеноконтрастность (210% Al) для безопасного применения.

### Lihtne ja universaalne rakendus | Простое и универсальное применение:

- 3 rakendust: direktsed restauratsioonid, kaviteedi põhja alusmaterjal või fissuuride silant. | 3 варианта применения: для прямых реставраций, в качестве подкладки кавитета или как фиссурный герметик.
- Saab kasutada väheinvasiivsete I, II ja III klassi kaviteetide täitmiseks. | Может использоваться для малоинвазивного заполнения полостей классов I, II и III.
- Kasutatav ka enda alla minevates kohtades tänu suurepärasele voolavusele. | Также подходит для заполнения поднутрений, благодаря отличным свойствам текучести.

# SZ Viskos Flow LC Gum

## Esteetiline valguskõvastuv täidismaterjal igemetooniga

Эстетический светоотверждаемый реставрационный материал с оттенками десен.

SZ Flow LC Gum on valguskõvastuv ja röntgenkontrastne, kõrge viskoossusega komposiitmaterjal. Seda saab kasutada hambakaela kaviteetide- ja V-kujuliste defektide täidisenä igemetretsiooniga piirkonnas. Kombineerib endas voolava komposiidi lihtsat käsitlemist ja komposiitmaterjali kõrgeid füüsilisi omadusi.

SZ Flow LC Gum - это светоотверждаемый рентгеноконтрастный композитный материал с высокой вязкостью. Может использоваться при полостях и V-образных дефектах на шейках зубов, подверженных рецессиям десен. Сочетает в себе легкость применения текучих композитов с высокими физическими характеристиками композитных материалов.



Before treatment





After treatment with SZ Viskos Flow LC Gum

## EELISED | ПРЕИМУЩЕСТВА

- Esteetiline ja ökonoomne lahendus kirurgiliste sekkumiste vältimiseks. Эстетичный и экономичный материал, позволяющий избежать хирургических вмешательств.
- Ka paljastunud krooniserva ja hambakõndi kaela katmiseks. | Также подходит для покрытия оголенных культей и краёв коронок.
- BPA, TEGDMA ja HEMA vaba - kõrge biosobivus. | Не содержит BPA, TEGDMA и HEMA - обладает высокой биосовместимостью.
- Võimalik katta paljastunud hambakaelasid tundlikkuse vähendamiseks. Может быть применен на оголённых шейках зубов, для уменьшения чувствительности.
- Ideaalne voolavus ja viskoossus (ei tilgu) | Идеальная растекаемость и вязкость (не капает).



## SZ VISKOS FLOW LC GUM

REF SZ15-21	Shade: Light - süstal/шприц (2g) 10 otsikut/насадок	
REF SZ15-22	Shade: Medium - süstal/шприц (2g) 10 otsikut/насадок	

# SZ Pulpa Secure LC

SZ Pulpa Secure stimuleerib hüdroksiapatiidi teket tänu oma bioaktiivsetele MTA omadustele märkimisväärse kaltsiumi vabanemisega. Tertsiaalse dentiini teke kaitseb hambapulpi dentiini kihiga.

SZ PulpaSecure stimuleerib hüdroksiapatiidi teket tänu oma bioaktiivsetele MTA omadustele märkimisväärse kaltsiumi vabanemisega. Tertsiaalse dentiini teke kaitseb hambapulpi dentiini kihiga.

## EELISED | ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Kaltsiumiioonide vabanemine stimuleerib tertsiaalse dentiini teket. Выделение ионов кальция стимулирует образование третичного дентина.
- ✓ Leeliselisel pH'l on bakteritsiidne toime, mis soodustab paranemist ja kaitseb ülitundlikkuse eest. | Высокий щелочной pH оказывает бактерицидное действие, способствует заживлению и защищает от повышенной чувствительности.
- ✓ SZ PulpaSecure LC on niiskustolerantne, lahustumatu ja kõrge röntgenkontrastusega. | SZ PulpaSecure LC устойчив к влаге, нерастворим и обладает высокой рентгеноконтрастностью.
- ✓ Saab rakendada väga täpselt isegi sügavates kaviteetides. | Может наноситься очень точно даже при подготовке глубоких полостей.
- ✓ Seejärel saab materjali valguskõvastada kontrollitud tingimustes. | После этого материал можно контролировать светом.



## NÄIDUSTUSED | ПОКАЗАНИЯ

- Otsene avatud pulbi katmine. | Прямое покрытие пульпы при любых типах её обнажения.
- Kaudne pulbi katmine sügava kaviteedi puhul. | Непрямое покрытие пульпы для глубоких полостей



### SZ PULPA SECURE

REF SZ18-10

1 süstal/шприц (1 g)  
12 otsikut/насадок



# SZ Cavity Base Lining

SZ Cavity Base Lining LC sisaldab bakteritsiidseid tsiingi ioone, mis pärsivad bakterite kasvu. Tootel on ka fluoriidi eraldumise tõttu kaariesevastane toime. Selle kontrollitud paisumine (umbes 1-2%) neutraliseerib komposiidi kootumise polümerisatsiooni ajal. See aga soodustab täpsemat täidise ääresulgu, vähendab tundlikkust ja sekundaarse kaariese teket.

SZ Cavity Base Lining LC содержит бактерицидные ионы цинка, подавляющие рост бактерий. Продукт также обладает антикариогенными свойствами, за счет выделения фторидов. Его контролируемое расширение (примерно 1-2%) противодействует усадке композита во время полимеризации. Это предотвращает возникновение краевых неточностей, образование вторичного кариеса и сводит к минимуму проблемы с чувствительностью.

## SZ CAVITY BASE LINING

REF SZ18-01

1 süstal/шприц (1 ml)

10 otsikut/насадок

## ALUSMATERJAL | ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



- ✓ Antibakteriaalne toime  
Антибактериальное действие
- ✓ Tundlikkust vähendav efekt  
Десенсибилизирующий эффект
- ✓ Kontrollitud laienemine  
Контролируемое расширение



# SZ Ultimate Cem

Isekleepuv ja kaksikkõvastuv tsement metallist-, keraamikast-, tsirkooniumist- ja komposiitidest valmistatud indirektsete restauratsioonide tsementeerimiseks.

Самоклеящийся цемент двойного отверждения для цементирования не прямых реставраций из металла, керамики, оксида циркония и композита.

## EELISED | ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Kaksikkõvastuv ja isekleepuv – happesöövitust ega bondi pole vaja! | Двойное отверждение и автоадгезия - бонд или протравливание не требуются!
- ✓ Suurepärase adhesiooni (21,6MPa) metalli, tsirkooniumi, silikaadi- ja oksiidkeraamikaga | Превосходная адгезия (21,6 МПа) к металлу, цирконию, силикатной и оксидной керамике.
- ✓ Suurepärase esteetika, materjali loomulikul värvil on valguse läbilaskvusvõime | Превосходная эстетика, естественный цвет пропускает свет.
- ✓ Õhuke tsemendi kiht tagab restauratsiooni täpse sobitavuse | Тонкая цементная пленка для точной притирки реставрации.
- ✓ Lihtne ülejääkide eemaldamine | Простое удаление излишков цемента
- ✓ Paisuvuse kontroll püsivaks ja tugevaks tsementeerimiseks - materjalil on vähene veeimavus | Контроль над расширением для получения прочной и долговечной цементной адгезии - материал имеет низкое водопоглощение.

01. ERILINE VOOLAV KONSISTENTS  
ОСОБАЯ ТЕКУЧАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ

02. SISALDAB SE-BONDI  
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ SE-БОНД

03. PAISUVUSE KONTROLL  
КОНТРОЛЬ РАСШИРЕНИЯ

## SZ ULTIMATE CEM

REF SZ17-11

1 süstal/шприц (5 ml)  
10 mixing tips



# SZ Core&Cement DC

SZ Core & Cement DC on kaksikkõvastuv, fluorestseeruv ja radiopaakne komposiit kõntide ülesehitamiseks ja indirektsete restauratsioonide (laminaadid, panused, kroonid ja sillad) tsemeteerimiseks.

SZ Core & Cement DC - fluorestsentne ja rentgenokонтрастne komposiit двойного отверждения для восстановления культи и для цементирования непрямых реставраций, таких как виниры, вкладки, накладки, коронки и мостовидные протезы.

## Kolm erinevat kasutusviisi | Три разных применения

- ✓ Kõndi ülesehitus | Восстановление культи
- ✓ Juurepostide (-tihvide) tsemeteerimine | Цементировка корневых штифтов
- ✓ Indirektsete restauratsioonide tsemeteerimine (laminaadid, panused, kroonid, klaaskeraamilised sillad, tsirkoonium, komposiit, tsirkooniumiga tugevdatud komposiit, väärismetall, mitteväärismetall või titaan) | Цементировка непрямых конструкций (виниры, вкладки, накладки, коронки, мосты из стеклокерамики, оксида циркония, композитов, композитов - армированных цирконием, драгоценных и недрагоценных металлов или титана).

## Kõrge biosobivus | Высокая биосовместимость

- ✓ BPA-vaba | Без BPA
- ✓ Kulumiskindel / survetugevus 290 MPa | Устойчивость к стиранию / сжатию 290 МПа
- ✓ Kaksikkõvastumine / Garanteeritud sügav kõvastumine! | Двойное отверждение / Гарантированное глубокое отверждение!

SZ CORE&CEMENT DC	
REF SZ17-21	1 automix syringe (8g), 5 mixing tips
REF SZ17-21-KIT	Master Cem Kit: 1x SZ CORE&CEMENT DC 1x SZ UNIVERSAL BONDING

## SZ Master Cem System

### SZ CORE&CEMENT + SZ UNIVERSAL BONDING

1 süsteem kõigile indirektsetele restauratsioonidele!

Одна система для всех непрямых реставраций!

### ASENDAB 12 TOODET | ЗАМЕНЯЕТ 12 ТОВАРОВ:

- Kõndi ülesehitusmaterjal | Материал для восстановления культи
- Juureposti tsement | Цемент для корневых штифтов
- Laminaatide tsement | Цемент для виниров
- Keraamika, komposiidi ja metalli tsement | Цемент для керамики, композитов и металлов
- Keraamika, tsirkooniumi ja metalli praimer | Праймер для керамики, циркония и металла
- Total etch bond, isesöövitav bond | Бонд полного травления, самопротравливающий бонд
- Kaksikkõvastumise aktivaator | Активатор двойного отверждения




# SZ ImplantMAX DC

## PARIM KOMBINATSIOON PARIMAST TSEMENTEERIMISEST JA LIHTSAST LAHTI ÜHENDAMISEST TEIE IMPLANTAATIDELE!

## ЛУЧШЕЕ СОЧЕТАНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕМЕНТИРОВКИ И ПРОСТОТЫ СНЯТИЯ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИЙ НА ИМПЛАНТАТАХ!

SZ ImplantMAX DC on ainulaadne kaksikkõvastuv poolajutine tsement, milles on ühendatud ohutu tsementeerimine ja lihtne eemaldamine (lahti võtmine). SZ ImplantMAX DC abil tsementeeritud kroone ja sildu on lihtne puhastada ja lihtne uuesti tagasi tsementeerida.

SZ ImplantMAX DC - это уникальный полувременный цемент двойного отверждения, который сочетает в себе безопасную цементировку с простотой снятия реставрации. Коронки и мосты, зацементированные с помощью SZ ImplantMAX DC, легко снять для чистки и повторно зацементировать.

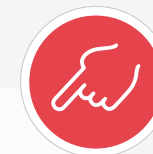

## EELISED | ПРЕИМУЩЕСТВА

- Kaksikkõvastuv – parim kõvastumise kontroll. | Двойное отверждение - улучшенный контроль отверждения
- Hõlpsasti eemaldatav ülevaatuseks | Легко снимается для осмотра.
- Elastne käitumine - kontrollitav laienemine hea pidamise jaoks | Расширение с контролируемым поведением для надежной фиксации
- Löökide absorptsioon - kaitseb mälumiskoormuse eest | Поглощение ударов - защищает от жевательной нагрузки.
- Suurepärase tihedus | Отличная герметичность
- Lihtne ülejääkide eemaldamine | Простое удаление излишков
- Lihtne tsementeerimine | Простая повторная цементировка
- Aega säästev | Экономия времени

## SZ IMPLANTMAX DC

REF SZ17-31

1 süstal/шприц (5 ml)

10 mixing tips

# SZ Temporary Cem

Nutikas lahendus ajutiste ja püsivate kroonide, sildade ja panuste ajutiseks tsemteerimiseks.

Умный раствор для временного цементирования временных и постоянных коронок, мостов, вкладок и накладок.



## EELISED | ПРЕИМУЩЕСТВА

- Eugenoolivaba: ei mõjuta vaigupõhiseid materjale | Не содержит эвгенола: не влияет на материалы на основе смол.
- Suurepärase kleerivuse ja kerge eemaldatavuse | Отличная адгезия и легкость удаления.
- Puudub sülje mõju | Не подвержен воздействию слюны.
- Õhuke kiht võimaldab head tsemteerimise täpsust ja sobitavust | Малая толщина слоя обеспечивает высокую точность установки.
- Lihtne ja kiire kasutada (tänu segamisotsikule) | Простота и скорость использования, благодаря шприцу для смешивания.
- Kõigi standardsete krooni-, silla- ja panuste materjalide jaoks | Для всех стандартных коронок, мостовидных протезов, вкладок и накладок.



## OMADUSED | ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ✓ Keemiline kõvastumine  
Химическое отверждение
- ✓ Eugenoolivaba  
Не содержит эвгенола
- ✓ Ajasäästlik ja lihtne käsitlemine  
Экономия времени и простота использования

### SZ TEMPORARY CEM

REF SZ17-41

2 double syringes à 5 ml  
20 mixing tips

# SZ Universal Bonding

SZ Universal Bonding on kaksikkõvastuv bond direktsetele ja indirektsetele restauratsioonidele. Bondi saab rakendada kõikide söövitustehnikate abil (isesöövitus, osaline söövitamine või täielik söövitamine). SZ Universaalset Bondi saab kasutada kombinatsioonis kaksik-, ise- või valguskõvastuvate komposiitide-, tsementide- (nt juurepostide või laminaatide tsementeerimiseks) või kõndi taastamise materjalidega. Materjal kleepub metallist, komposiidist, tsirkooniumist või alumiiniumoksiidist valmistatud indirektsete restauratsioonide külge.

SZ Universal Bonding - бонд двойного отверждения для прямых и непрямых реставраций. Данный бонд можно наносить всеми методами травления (самопротравливание, метод селективного протравливания или полное протравливание). SZ Universal Bonding может использоваться в сочетании с композитами двойного отверждения, самоотверждения или светового отверждения, с цементами (например, для цементирования корневых штифтов или виниров) или с материалами для восстановления культи. Материал приклеивается к непрямым реставрациям из металла, композита, оксида циркония или алюминия.



## NUTIKAS BOND | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БОНД

SZ UNIVERSAL BONDING ASENDAB JÄRGMISI TOOTEID | SZ UNIVERSAL BONDING ЗАМЕНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

- ✓ Total-Etch Bond | Бонд тотального протравливания
- ✓ Isesöövitav Bond | Самопротравливающий бонд
- ✓ Kaksikkõvastuv Aktvaator | Активатор двойного отверждения
- ✓ Applikaatorhari | Кисть или аппликатор для нанесения
- ✓ Keraamika praimer | Праймер для керамики
- ✓ Tsirkooniumi praimer | Праймер для циркония
- ✓ Metalli praimer | Праймер для металла

### SZ UNIVERSAL BONDING

REF SZ20-00	Bond A bottle (5ml) Bond B bottle (5ml) 50 brushes 1 mixing pallet
-------------	---

# SZ DesensiMAX

SZ DesensiMax on ühekomponentne silikoonipõhine materjal, mis moodustab tundlike hambakaelte- ja paljastunud hambaosadele kaitsekihi.

SZ DesensiMax - однокомпонентный материал на основе силикона, который образует защитный слой на шейках чувствительных зубов и на обнаженном дентине.



## SZ DESENSIMAX

REF SZ22-01

2 bottles (à 0,5 ml)  
4 application tips

## NÄIDUSTUSED | ПОКАЗАНИЯ



- Kasutamine peale hammaste valgendamist | Нанесение после отбеливания.
- Tundliku hambakaela katmiseks | Для защиты чувствительных шеек зубов.
- Kaitse hambakivi eemaldamise/profülaktiliste võtete järgselt | Для защиты после удаления зубного камня / профилактического лечения

## KLEEPUMINE ILMA SÖÖVITUSETA | АДГЕЗИЯ БЕЗ ПРОТРАВЛИВАНИЯ

SZ DesensiMax on silikoonipõhine ühekomponentne materjal, mis vähendab happelist tundlikkust. Materjal kleepub pinnale ilma söövitusega. | SZ DesensiMax - однокомпонентный материал на основе силикона, который снижает чувствительность к кислотам. Материал приклеивается без протравливания.

## LIHTNE JA AJASÄÄSTLIK | ПРОСТОТА И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Pealekandmine on lihtne ja aega säästev. Vajadusel saab korrata või lisada. | Нанесение простое и экономное. При необходимости может быть обновлен или добавлен.

## OPTIMAALNE KAITSE & REMINERALISATSIOON ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ

Moodustab tugeva ühenduse emaili- ja dentiinigaja tagades parima hambapinna katte ja -kaitse. Sisaldab nano-fluorapatiite, nano-kaltsiumfluoriidi ja lahustuvaid fluoriide, mis aitavad hambastruktuuri remineraliseerida. | Препарат образует прочную связь с эмалью и дентином, обеспечивая лучшую герметизацию и защиту зуба. Содержит нанофлуороапатит, нанофторид кальция и растворимые фториды, которые помогают remineralизировать структуру зубов.

# SZ Construction Dual

Lihtne ja kiire lahendus ajutiste kroonide- ja sildade valmistamiseks.

Простое и быстрое решение для изготовления временных коронок и мостовидных протезов.



## SZ CONSTRUCTION

REF SZ21-04	1 cartridge (50 ml) A3 10 mixing tips
-------------	--

### MIKS LIHTNE? ПОЧЕМУ ПРОСТОЙ?

- Saate materjali otse jäljendisse viia | Вы можете наносить материал прямо на слепок.
- Teie kontrollite kõvenemise aega - kaksikkõvastuv materjal | Время отверждения выбираете вы - материал двойного отверждения
- Tänu „Snap Set“ käitumisele ajutine restauratsioon hõlpsasti ja ohutult eemaldatav. | Благодаря затвердеванию «Snap Set» вы можете легко снять временную реставрацию, не разрывая ее.

### MIKS OHUTU? ПОЧЕМУ БЕЗОПАСНО?

- Valmistate oma patsientidele metüülmetakrülaadivabad ajutised restauratsioonid. | Вы изготавливаете временные реставрации без метилметакрилата для своих пациентов.
- Materjal tekitab polümeerisatsiooni ajal vähe soojust, mis on patsiendile mugav | Материал не сильно нагревается во время полимеризации, таким образом, обеспечивая комфорт для пациентов.
- Vähene määrdekiht (smear layer) | Низкий смазывающий слой.
- SZ Constructon'iga tehtud ajutised konstruktsioonid on äärmiselt purunemiskiunlad ja varvistiilsed ning neid saab kasutada ka pikaajaliste ajutiste lahendustena. | Ваши временные реставрации, изготовленные с помощью SZ Constructon, чрезвычайно устойчивы к разрушению и стабильны по цвету, а также могут использоваться в качестве временных реставраций на длительный срок.

### MIKS KIIRE? ПОЧЕМУ БЫСТРО?

- Saate kõrge täpsusega ajutise restauratsiooni mis vajab vähem lisatöötlemist | Вы получаете высокую точность изготовленных временных реставраций, и следовательно требуется меньше подгонки и обработки.
- Kiired ja esteetilised tulemused saavutatakse tänu materjali fluorestsentsile. | Быстрый и эстетичный результат достигается благодаря флуоресценции материала.
- Teie otsustate kõvenemise aja - kaksikkõvanen materjal | Время отверждения выбираете вы - материал двойного отверждения



# SZ Matrix Constructor

## 1 Toode = 2 FUNKTSIOONI 1 ПРОДУКТ = 2 ФУНКЦИИ

SZ Matrix Constructor on läbipaistev maatriksmaterjal prepareerimiseelse hambapinna jäljendi (šabloon) tegemiseks. See jäljend moodustab täpse läbipaistva maatriksi järgneva taastamiseks (nt. laminaadid) või ajutiseks restauratsiooniks. SZ Matrix Constructor on kasulik ka kiireks ja täpseks hambumuse registreerimiseks läbipaistva hambumuse registreerimismaterjalina. Hambumuse registreerimisel saab oklusiooni visuaalselt kontrollida.

SZ Matrix Constructor - это прозрачный матричный материал для создания оттиска (шаблона) поверхности зубов перед препарированием. Этот слепок (шаблон) образует точную прозрачную матрицу для последующей реставрации (например, виниров) или временной реставрации. SZ Matrix Constructor также полезен в качестве прозрачного материала для быстрой и точной регистрации прикуса. Окклюзию можно проверить визуально во время регистрации прикуса.

### SZ MATRIX CONSTRUCTOR

REF SZ21-10

2 cartridges (à 50 ml)  
12 mixing tips

Looge oma kohandatud restauratsioonimaatriks! Saab kasutada ka hambumuse registreerimise materjalina!

Создайте собственную матрицу для реставрации! Может также использоваться в качестве материала для регистрации прикуса!

## EELISED | ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ 1 toode = 2 funktsiooni: šabloon valmistamine ja hambumuse registreerimine  
1 продукт = 2 функции: создание матрицы реставрации и материал для регистрации прикуса
- ✓ Täiuslik valguskõvastumine tänu läbipaistvusele | Идеальное светоотверждение, благодаря прозрачности
- ✓ Kombinatsioonis SZ Constructoniga: ajutiste restauratsioonide kiire valmistamine | В сочетании с SZ Constructon: очень быстрое средство для временных реставраций.
- ✓ Saab kasutada ka hambumuse registreerimise materjalina | Может также использоваться в качестве материала для регистрации прикуса.
- ✓ Hambumuse registreerimisel saab oklusiooni visuaalselt kontrollida | Окклюзию можно проверить визуально во время регистрации прикуса.



## VISIT US ONLINE

CURRENT INFORMATION ABOUT  
PRODUCT INNOVATIONS

[www.neotecdental.de](http://www.neotecdental.de)

**NEO-TEC Dental**  
Carl-v.-Ossietzky-Str. 25  
99423 Weimar  
Germany

Tel.: +49 3643/4434363  
Fax: +49 3222/4392960  
Mail: [info@neotecdental.de](mailto:info@neotecdental.de)  
[www.neotecdental.de](http://www.neotecdental.de)